

Nieuwe Aequi Flex

Herwin uw vrijheid





Innovatief design

Optimale pasvorm
Aequi-stabiliteit
Super comfortabel





Verbeterd in elk opzicht

Maak kennis met de nieuwe Push® med enkelbrace Aequi Flex, met een geoptimaliseerde pasvorm, Aequi-stabiliteit en een zeer hoge mate van comfort.

Deze innovatieve brace vervangt de oorspronkelijke Aequi Flex in ons assortiment en is beschikbaar naast de Push ortho Aequi, zodat artsen kunnen blijven kiezen uit verschillende behandelingsmogelijkheden.

Met de lancering van de nieuwe Aequi Flex gaan we een nieuw tijdperk in voor de Aequi-reeks, die sinds de lancering in 1998 een begrip is onder medische professionals.










Flex-protect: Aequi-stabiliteit in een nieuwe vorm

Het Aequi-concept, met zijn mediale schaal en mediolaterale verankeringsband, is al vele jaren een groot succes. Nu neemt de nieuwe Push Aequi Flex het oorspronkelijke ondersteunende en toch comfortabele concept over en verbetert het op een innovatieve manier. We noemen het het Flex-protect-systeem.

De mediale versteviging is opnieuw ontworpen, met een schaal die stijf is in het midden en met meer flexibiliteit naar de randen toe. De schaal omsluit het onderbeen, de enkel en de hiel en heeft een uitsparing voor de malleolus.

Aan de voorkant verankert het diagonale bandensysteem van de brace de voet in de schaal. De gesloten keten van schaal en band biedt tegelijkertijd inversiecontrole en compressie.

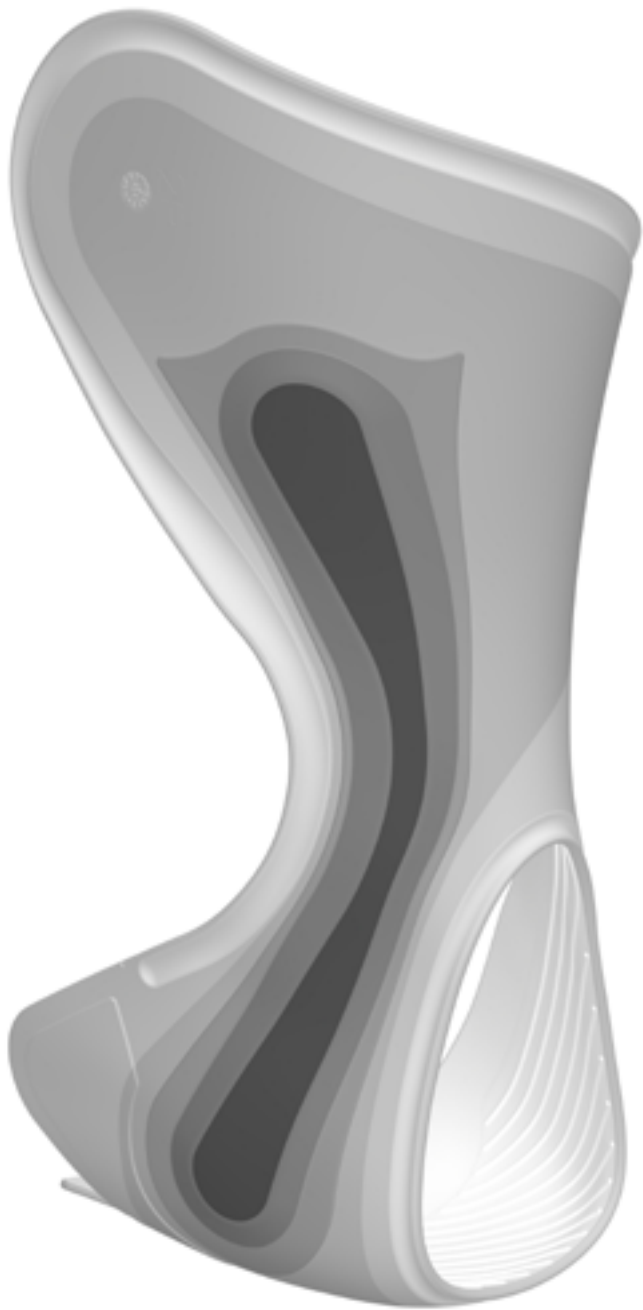

← Rigide → Flexibel



Geheel nieuwe schaal

De nieuwe Flex-protect-schaal biedt stabiliteit en flexibiliteit in één. Het Push-ontwerp maakt gebruik van geavanceerde 3D-technieken en heeft een stijve basis die zo is gevormd dat buigen en strekken mogelijk is. Door gebruik te maken van verschillende lagen zachte en harde materialen, wordt de schaal naar de randen toe steeds flexibeler, zodat hij zich mooi aanpast aan de anatomie van de gebruiker.









Nieuw functioneel bandsysteem

Een tweede innovatie resulteert in het bandsysteem, waarbij de diagonale band wordt gecombineerd met een extra compressie-element aan de laterale zijde van de enkel.

Aan de voorkant verankert het diagonale bandsysteem van de brace de voet in de schaal. De band bestaat uit een elastisch en een niet-elastisch deel, die geïntegreerd zijn in een sluitingsysteem met een laag volume, dat tegelijkertijd inversie-stabiliteit en compressie biedt.

Dit maakt de Flex-protect-innovatie compleet: solide bescherming en flexibiliteit voor comfort.


De compressieve banden

De stabilisatie van de enkel wordt gecompleteerd door compressieve banden. Push Aequi Flex biedt goed verdeelde compressie aan de voet en enkel, met twee elastische banden, gewikkeld in de vorm van een 8. Afhankelijk van de behoeften van de patiënt kunt u de compressie aanpassen door de elastische banden strakker of losser aan te leggen. De siliconenapplicatie aan de binnenzijde zorgt voor een stevige sluiting, die de hele dag blijft zitten.

Indicaties:

- Acuut lateraal enkelbandletsel
- Nabehandeling van conservatief of operatief behandelde enkelfracturen
- Matige tot ernstige instabiliteit
- Matige tot ernstige artrose
- Secundaire preventie van enkelbandletsel

Uitvoering:	Omtrek:	Maat:
links en rechts	27 – 31 cm	1
	31 – 34 cm	2
	34 – 40 cm	3

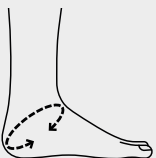





Ongeëvenaarde stabiliteit


Door het gebruik van de Push Aequi Flex enkelbrace als onderdeel van een behandelplan kan een patiënt de enkel in een vroeg stadium volledig belasten en tegelijkertijd rekenen op optimale stabiliteit.

Deze stabiliteit is bewezen in tests van de nieuwe Push Aequi Flex ten opzichte van de beste alternatieven in de markt. Een geavanceerd testsysteem, ontworpen door het Fraunhofer Instituut*, heeft aangetoond dat de mate van fysieke stabilisatie die de nieuwe Aequi Flex biedt, ondanks het extra comfort, overeenstemt met die van zijn voorganger. Voor stabiliteit blijft Aequi de allerbeste enkelbrace. Maar nu met nog meer comfort.

*

A novel method for functional testing of ankle braces based on a modified prosthetic foot testing machine – updated,
Department Biomechatronic Systems, Fraunhofer IPA, Germany

Inversieweerstand, koppel in Nm

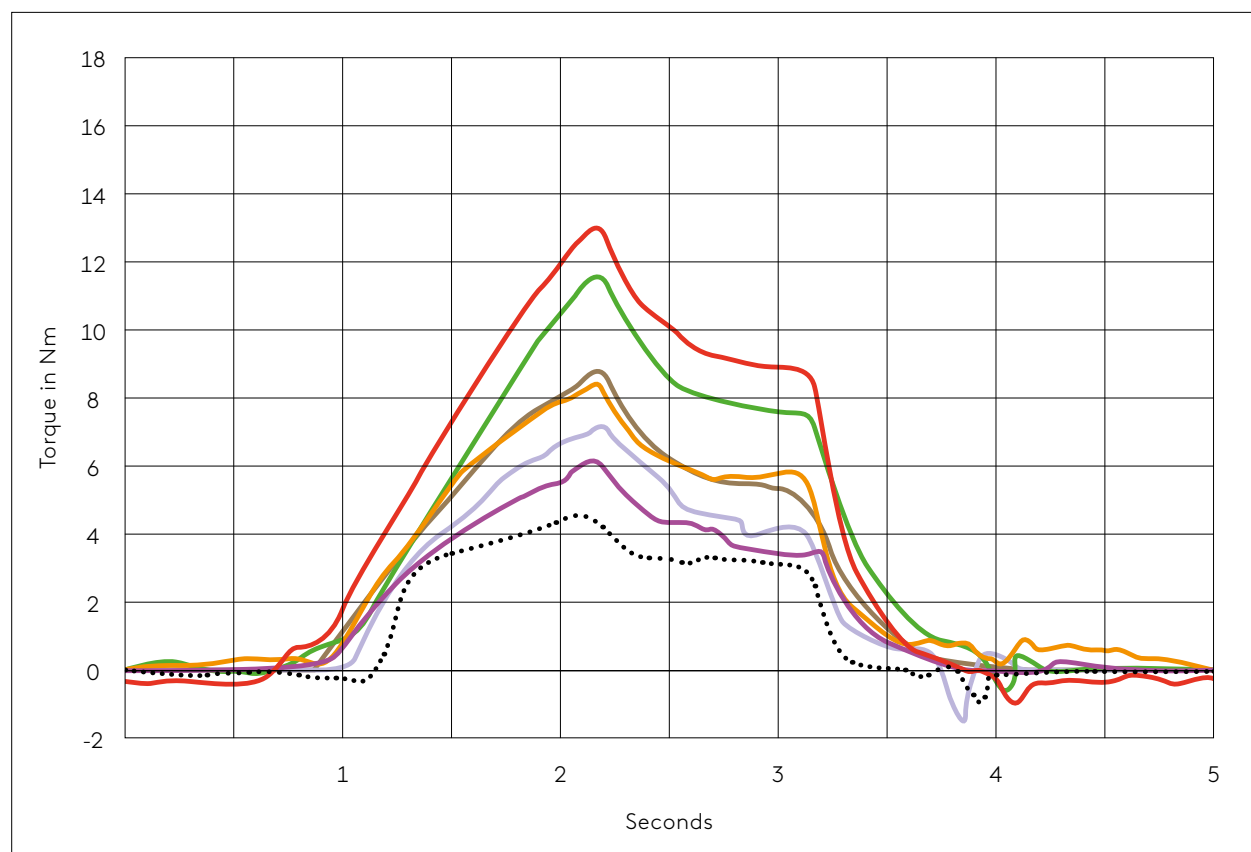

■ Brace A – Nieuwe Push Aequi Flex
■ Brace B
■ Brace C
■ Brace D

■ Brace E
■ Brace F
■ Zonder brace











Herwin uw vrijheid

Push heeft een passie voor bewegingsvrijheid. Zo gepassioneerd, dat we iedereen die vrijheid willen geven. Omdat actieve mensen een betere levenskwaliteit hebben. Hoe doen we dit? Door onconventionele oplossingen te ontwikkelen die iedereen met een blessure of een mobiliteitsbeperkende fysieke aandoening in staat stellen te bewegen en te genieten van oude of nieuwe vrijheden.

Push braces. Sinds 1986.



Push for
freedom

push.eu

9031 - 02/23