

Nouvelle Aequi Flex

Retrouvez votre liberté





Conception innovante

Ajustement optimal
Stabilité Aequi
Confort inégalé





Amélioration globale

Découvrez la nouvelle orthèse de cheville Push® med Aequi Flex qui offre un ajustement optimal, procure la stabilité Aequi et assure un confort inégalé.

Cette mise à niveau novatrice, qui remplace l'Aequi Flex originale dans notre gamme, est disponible parallèlement à l'orthèse de cheville Push ortho Aequi et offre ainsi diverses options de traitement aux médecins.

Le lancement de la nouvelle orthèse Aequi Flex marque le début d'une nouvelle ère pour la gamme Aequi - un produit apprécié dans le monde médical depuis son lancement en 1998.










Flex-protect: la stabilité Aequi sous une nouvelle forme

Le concept Aequi, avec sa coque médiale et sa sangle médio-latérale, rencontre un franc succès depuis de nombreuses années. La nouvelle orthèse Push Aequi Flex revisite le concept original de soutien confortable et l'améliore d'une façon novatrice. C'est ce qu'on appelle le système Flex-protect.

Le soutien médial a été repensé et se compose d'une coque rigide en son centre et davantage flexible au niveau des bords. Le soutien rigide se situe exclusivement sur la partie médiale de la cheville et présente une cavité au niveau de la malléole.

À l'avant, le système de sangle diagonale de l'orthèse fixe le pied dans la coque. La boucle fermée qui se forme entre la coque et la sangle permet de contrôler l'inversion tout en exerçant une compression.

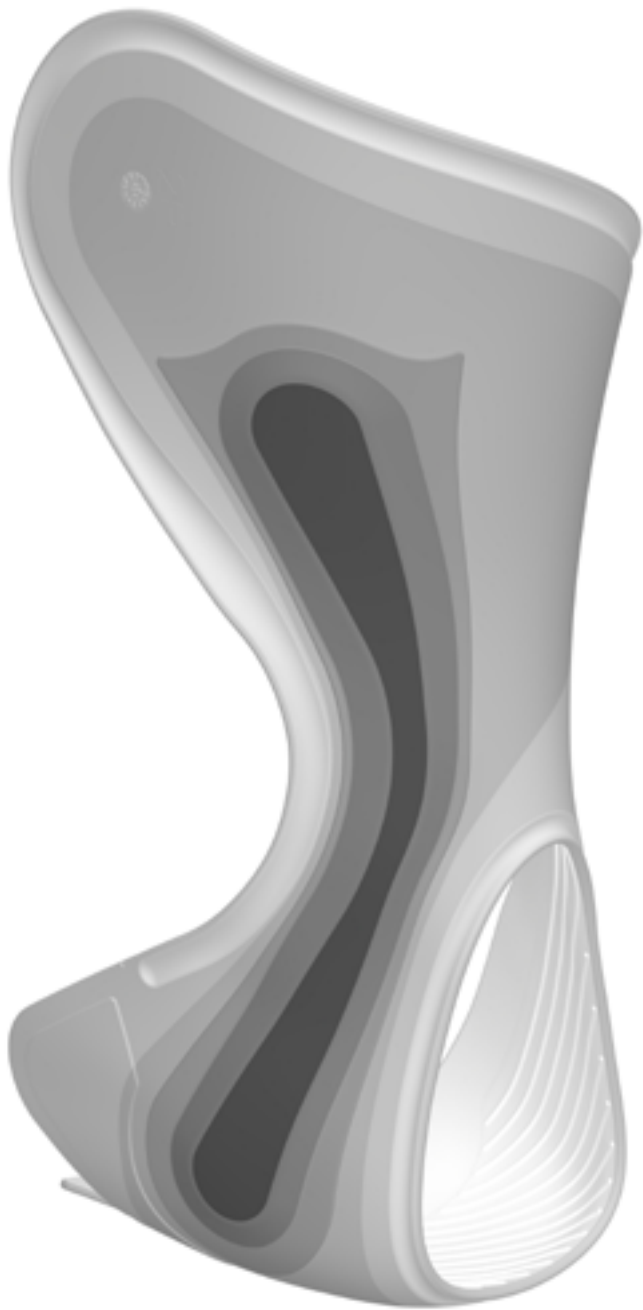

← Rigide Flexible →



Coque novatrice

La nouvelle coque Flex-protect offre à la fois stabilité et flexibilité. Le modèle Push, conçu à l'aide de techniques 3D sophistiquées, se compose d'une coque au cœur rigide dont la forme permet des mouvements de flexion et d'extension. Grâce à la juxtaposition de différentes couches de matériaux souples et rigides, la coque est extrêmement flexible au niveau des bords et s'adapte ainsi parfaitement à l'anatomie de son utilisateur.









Nouveau système de sangle fonctionnel

Le système de sangle représente la deuxième innovation, qui combine la sangle diagonale à un élément de compression supplémentaire sur le côté latéral de la cheville.

À l'avant, le système de sangle diagonale de l'orthèse fixe le pied dans la coque. La sangle se compose d'une partie élastique et d'une autre non élastique, qui sont intégrées dans une surface à volume limité, offrant à la fois stabilité en inversion et compression.

L'innovation Flex-protect est ainsi complète: protection rigide et flexibilité sont un gage de confort.


Les sangles de compression

La stabilisation de la cheville est réalisée à l'aide de sangles de compression. Push Aequi Flex offre une compression distribuée de manière homogène du pied et de la cheville, grâce à deux sangles élastiques en forme de 8. En fonction des besoins du patient, vous pouvez ajuster la compression en resserrant ou desserrant les sangles élastiques. L'application de silicone sur l'intérieur garantit une fermeture solide, qui se maintient en place tout au long de la journée.

Indications:

- Entorse latérale aiguë de la cheville
- Traitement de suivi des fractures de la cheville suite à un traitement opératoire ou conservateur
- Instabilité modérée à majeure
- Ostéoarthrite modérée à grave
- Prévention secondaire de l'entorse de la cheville

Modèle:	Circonférence:	Dimension:
gauche	27 – 31 cm	1
et droite	31 – 34 cm	2
	34 – 40 cm	3

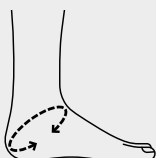





Stabilité inégalée


En utilisant l'orthèse de cheville Push Aequi Flex dans le cadre d'un plan de traitement, un patient peut la mettre sous charge totale à un stade précoce, tout en pouvant compter sur une stabilité optimale.

Cette stabilité a été avérée lors des tests de la nouvelle Push Aequi Flex par rapport aux alternatives les plus courantes. Un système de test avancé, conçu par le Fraunhofer Institute*, a révélé que malgré le confort supplémentaire, le degré de stabilisation physique effectif offert par la nouvelle Aequi Flex correspond à celui de son prédécesseur. En termes de stabilité, Aequi demeure l'orthèse pour cheville à la pointe de la technologie. Maintenant disponible avec un confort accru.

*

A novel method for functional testing of ankle braces based on a modified prosthetic foot testing machine – updated, Department Biomechatronic Systems, Fraunhofer IPA, Germany

Résistance aux mouvements d'inversion, couple en Nm

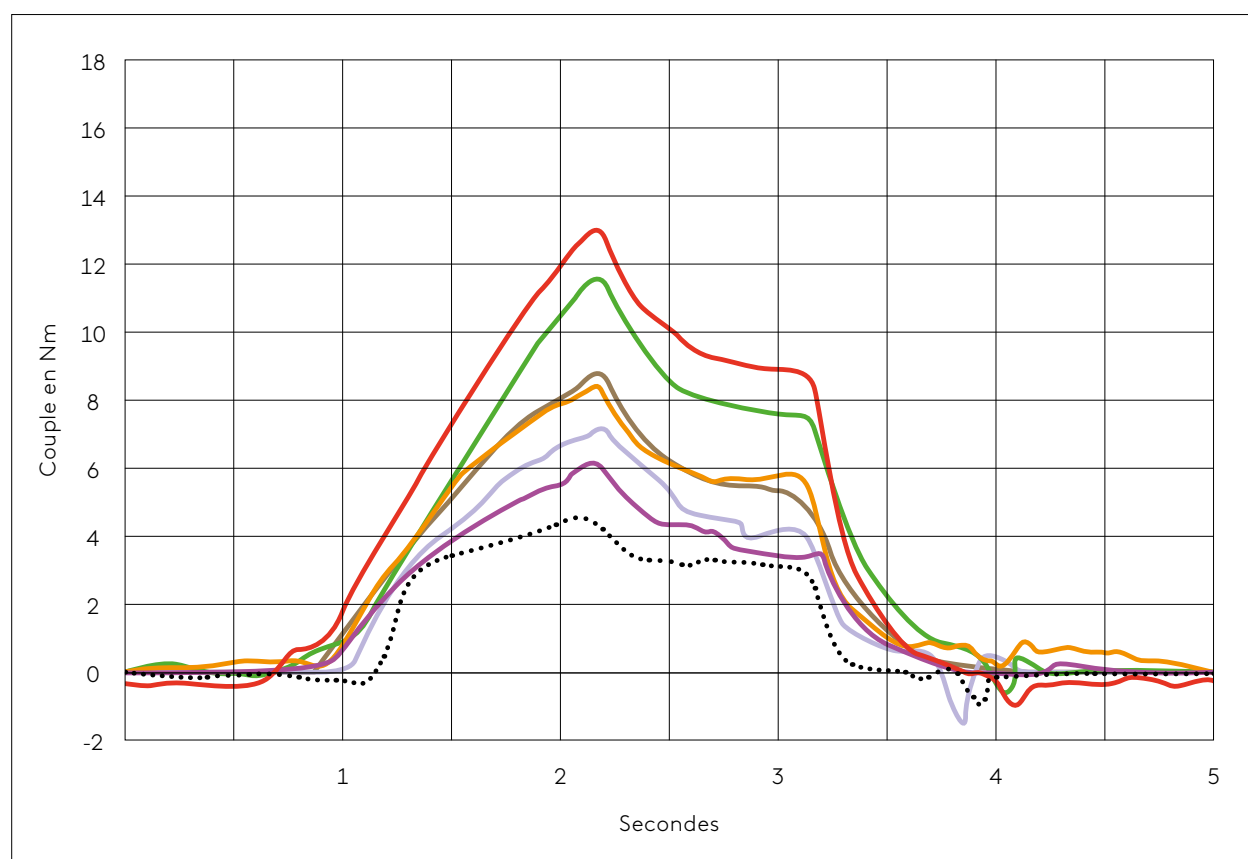

■ Orthèse A – Nouvelle Push Aequi Flex
■ Orthèse B
■ Orthèse C
■ Orthèse D

■ Orthèse E
■ Orthèse F
■ Sans orthèse











Retrouvez votre liberté

Push Aequi a été conçue dans un esprit de liberté de mouvement, pour offrir cette liberté à chacun et permettre aux personnes actives d'avoir une meilleure qualité de vie. Comment? En mettant au point des solutions non conventionnelles qui permettent à toute personne souffrant d'une blessure ou d'une mobilité réduite de se déplacer et de retrouver d'anciennes libertés, ou d'en découvrir des nouvelles.

Push braces. Depuis 1986.



Push for
freedom

push.eu

9032 - 02/23