

Nueva Aequi Flex

Recupere su libertad





Innovador diseño

Ajuste optimizado
Estabilidad Aequi
Confort superior





Mejorada en todos los sentidos

Te presentamos la nueva tobillera Push® med Aequi Flex con ajuste optimizado, estabilidad Aequi y confort superior.

En sustitución de la Aequi Flex original de nuestra gama, esta innovadora actualización está disponible junto con Push ortho Aequi, ofreciendo así a los médicos una variedad de opciones de tratamiento.

Con el lanzamiento de la nueva Aequi Flex, entramos en una nueva era para la gama Aequi: una de las favoritas de la profesión médica desde su lanzamiento en 1998.










Flex-protect: estabilidad Aequi con una nueva forma

El concepto Aequi, con su férula medial y cinta de anclaje mediolateral, lleva muchos años siendo un gran éxito. Ahora la nueva Push Aequi Flex toma el concepto original de apoyo confortable y lo potencia de una manera nueva e innovadora. Nosotros lo llamamos el sistema Flex-protect.

Se ha rediseñado el refuerzo medial, que lleva una férula rígida en el centro con un aumento de la flexibilidad hacia los bordes. La férula envuelve la parte inferior de la pierna, el tobillo y el talón, y tiene un hueco para el maléolo.

En la parte frontal, el sistema de tiras diagonales de la tobillera fija el pie en la férula. Al cerrar el velcro de la férula y la tira se consigue control de la inversión y, al mismo tiempo, compresión.

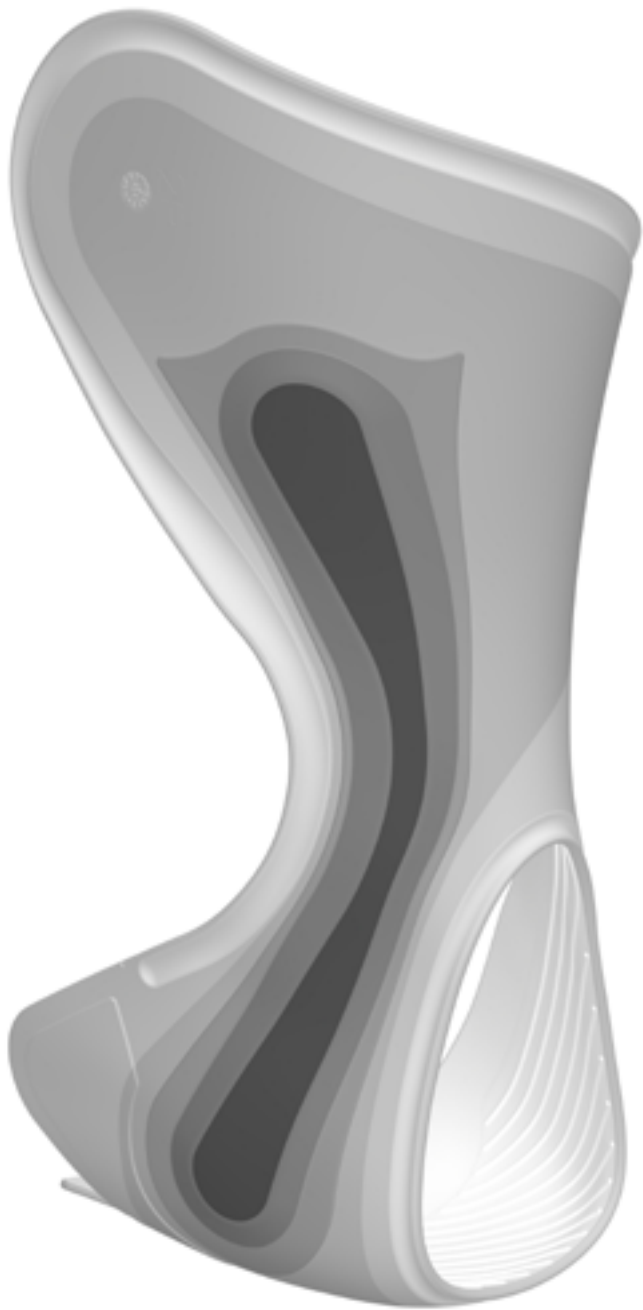

← Rígido Flexible →



Férula totalmente nueva

La nueva férula Flex-protect ofrece estabilidad y flexibilidad en uno. Con un diseño de Push basado en sofisticadas técnicas 3D, la férula tiene un núcleo rígido con una forma que permite la flexión plantar y dorsal. Mediante el uso de diferentes capas de materiales blandos y duros, esta férula se va haciendo más flexible hacia los bordes, de forma que se adapta perfectamente a la anatomía de cualquier usuario.









Nuevo sistema de tiras funcionales

Una segunda innovación ha sido el sistema de tiras, que combina la tira diagonal con un elemento compresor extra en el lateral del tobillo.

En la parte frontal, el sistema de tiras diagonales de la tobillera fija el pie en la férula. La tira tiene una parte elástica y otra inelástica que están integradas en una superficie de escaso volumen, ofreciendo estabilidad de inversión y, al mismo tiempo, compresión.

Así se completa la innovación Flex-protect: protección sólida y exhibilidad para el confort.


Las tiras compresivas

La estabilización del tobillo se completa con las tiras compresivas. Push Aequi Flex proporciona una compresión bien distribuida del pie y el tobillo, con dos tiras elásticas en forma de ocho. En función de las necesidades del paciente, se puede ajustar la compresión tensando o aflojando las tiras elásticas. Su revestimiento de silicona asegura un cierre sólido que se mantiene en su sitio a lo largo de todo el día.

Indicaciones:

- Esguince de tobillo lateral agudo
- Tratamiento de seguimiento de fracturas de tobillo tratadas de forma conservadora o quirúrgica
- Inestabilidad de moderada a grave
- Osteoartritis de moderada a grave
- Prevención secundaria del esguince de tobillo

Versiones:	Contorno:	Talla:
izquierda	27 – 31 cm	1
y derecha	31 – 34 cm	2
	34 – 40 cm	3

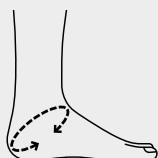





Estabilidad sin igual


Usando la tobillera Push Aequi Flex como parte de un plan de tratamiento, los pacientes pueden conseguir apoyar todo el peso en una fase temprana sin dejar de poder contar con una estabilidad óptima.

Esta estabilidad ha sido demostrada en ensayos de la nueva Push Aequi Flex en comparación con las alternativas líderes. Un avanzado sistema de ensayo, diseñado por el Fraunhofer Institute*, indicó que, a pesar de su confort adicional, el grado de estabilización física real que ofrece la nueva Aequi Flex es igual que el de supradecesora. En cuanto a estabilidad, Aequi sigue siendo la tobillera de última generación. Pero, ahora, con más confort aún.

*

A novel method for functional testing of ankle braces based on a modified prosthetic foot testing machine – updated, Department Biomechatronic Systems, Fraunhofer IPA, Germany

Resistencia a la inversión, esfuerzo de torsión en Nm

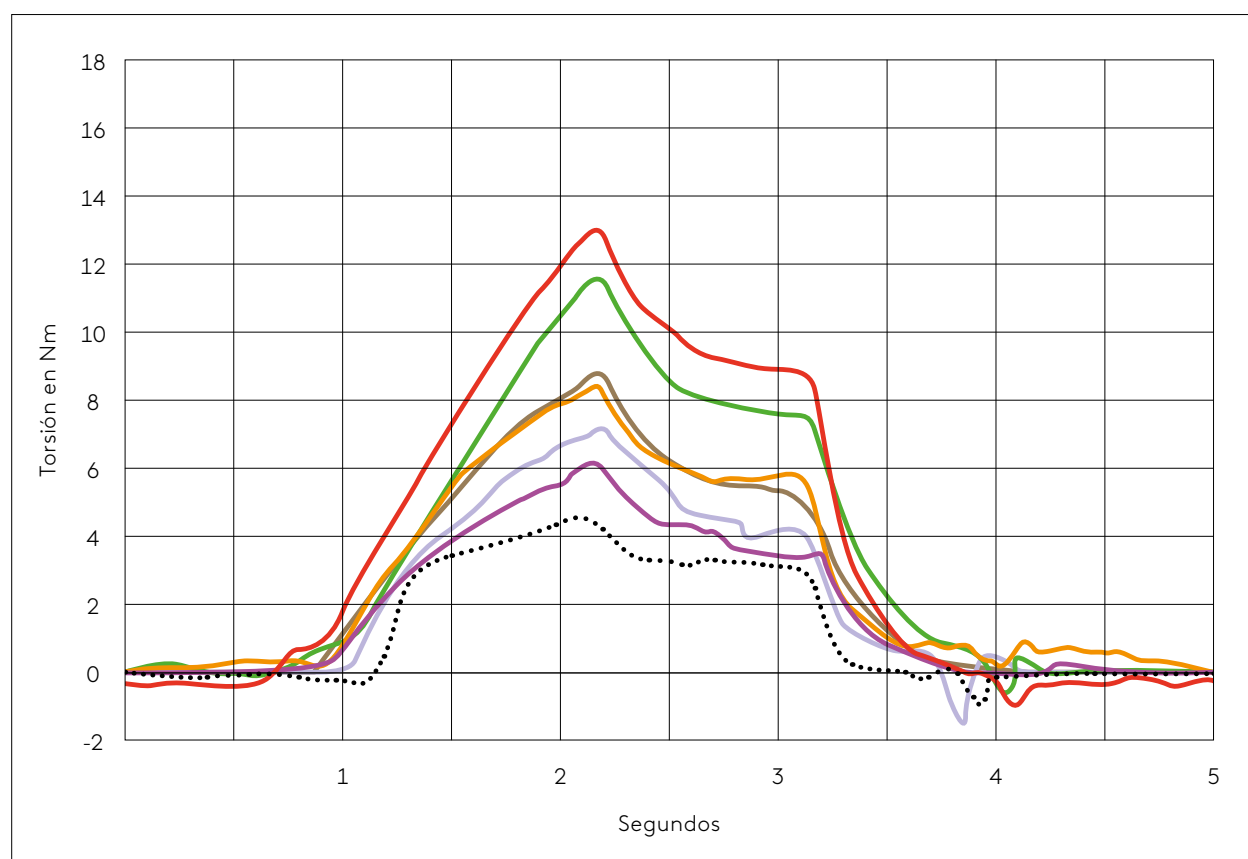

- Tobillera A – Nueva Push Aequi Flex
- Tobillera B
- Tobillera C
- Tobillera D

- Tobillera E
- Tobillera F
- Sin que tobillera











Recupere su libertad

En Push nos apasiona la libertad de movimiento. Tanto, que queremos dársela a tantas personas como podamos, porque los individuos activos disfrutan de una mejor calidad de vida. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollando soluciones no convencionales que permitan moverse y disfrutar de libertades recuperadas o nuevas a toda persona que sufra una lesión o una enfermedad física que afecte a la movilidad.

Push braces. Desde 1986.



Push for
freedom

push.eu

9 035 - 02/23