

Nová bandáž Aequi Flex

Získejte zpět svobodu





Inovativní design

Skvěle padne
Aequi stabilita
Mimořádně
komfortní





Lepší ve všech směrech

Představujeme novou bandáž na kotník Push® med Aequi Flex, která se vyznačuje stabilitou Aequi, mimořádným komfortem a navíc skvěle padne.

Nahrazující v naší nabídce původní Aequi Flex, je tato inovace k dispozici společně s ortézou Push ortho Aequi, takže lékařům nabízí výběr různých možností léčby.

Uvedením nové řady Aequi Flex na trh vstupujeme do nové éry řady Aequi, která je u lékařů oblíbená již od svého uvedení na trh v roce 1998.









Flex-protect: Aequi stabilita v nové podobě

Koncept Aequi s mediální skořepinou a popruhem zabezpečujícím mediolaterální podporu slaví velký úspěch již mnoho let. Nový model Push Aequi Flex přebírá původní podpurný a zároveň pohodlný koncept a vylepšuje jej novým a inovativním způsobem. Tento systém nazýváme Flex-protect.

Mediální výztuha je přepracovaná a obsahuje skořepinu, která je uprostřed pevná a směrem k okrajům pružnější. Skořepina obepíná dolní část nohy, kotník a patu a má prohlubeň pro kotník.

Vpředu fixuje nohu ve skořepině systém diagonálních popruhů. Uzavřená konstrukce skořepiny a popruhu umožňuje kontrolu nohy při inverzi a zároveň i kompresi.



Zcela nová skořepina

Nová skořepina Flex-protect nabízí zároveň pevnost i pružnost. Konstrukce Push využívá sofistikované 3D techniky. Má pevné jádro, které umožňuje ohýbání nahoru a dolů. Díky použití různých vrstev měkkých a tvrdých materiálů je skořepina směrem k okrajům postupně pružnější, takže se krásně přizpůsobí anatomii každého uživatele.









Nový systém funkčních popruhů

Výsledkem druhé inovace je systém popruhů, kombinující diagonální popruh s přidáním kompresním prvkem na laterální straně kotníku.

Vpředu systém diagonálních popruhů fixuje nohu ve skořepině. Popruh se skládá z elastické a neelastické části. Ty jsou integrovány do nízkoobjemového povrchu a zajišťují inverzní stabilitu a zároveň kompresi.

To vše dohromady tvoří inovativní systém Flex-protect: pevnou ochranu a flexibilitu pro větší pohodlí.


Kompresní popruhy

Stabilizace kotníku je zkompletována pomocí kompresních popruhů. Push Aequi Flex nabízí dobře rozloženou kompresi nohy a kotníku díky dvěma pružným popruhům ve tvaru osmičky. Kompresi můžete upravit podle potřeb pacienta utažením nebo povolením elastických popruhů. Silikonový potah zajišťuje pevné upnutí po celý den.

Indikace:

- Akutní boční výron kotníku
- Následná léčba fraktury kotníku, které předcházela léčba konzervativní či chirurgická
- Mírná až závažná nestabilita
- Mírná až závažná osteoartróza
- Sekundární prevence výronu kotníku

Provedení:	Obvod:	Velikost:
levé a pravé	27 – 31 cm	1
	31 – 34 cm	2
	34 – 40 cm	3

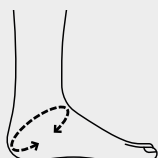





Bezkonkurenční stabilita


S kotníkovou ortézou Push Aequi Flex jako součástí léčby, si může pacient dovolit plnou zátěž již v raném stadiu a zároveň se může spolehnout na optimální stabilitu.

Tato stabilita byla prokázána při testech nové bandáže Push Aequi Flex ve srovnání s předními alternativami. Pokročilý testovací systém navržený Fraunhoferovým institutem* ukázal, že navzdory vyššímu pohodlí odpovídá stupeň skutečné fyzické stabilizace, který nabízí nový systém Aequi Flex, stupni stabilizace jeho předchůdce. Aequi zůstává nejkvalitnější ortézou pro zajištění stability kotníku. A nyní s ještě větším pohodlím.

*

A novel method for functional testing of ankle braces based on a modified prosthetic foot testing machine – updated, Department Biomechatronic Systems, Fraunhofer IPA, Germany

Brání inverzi nohy, točivý moment v Nm

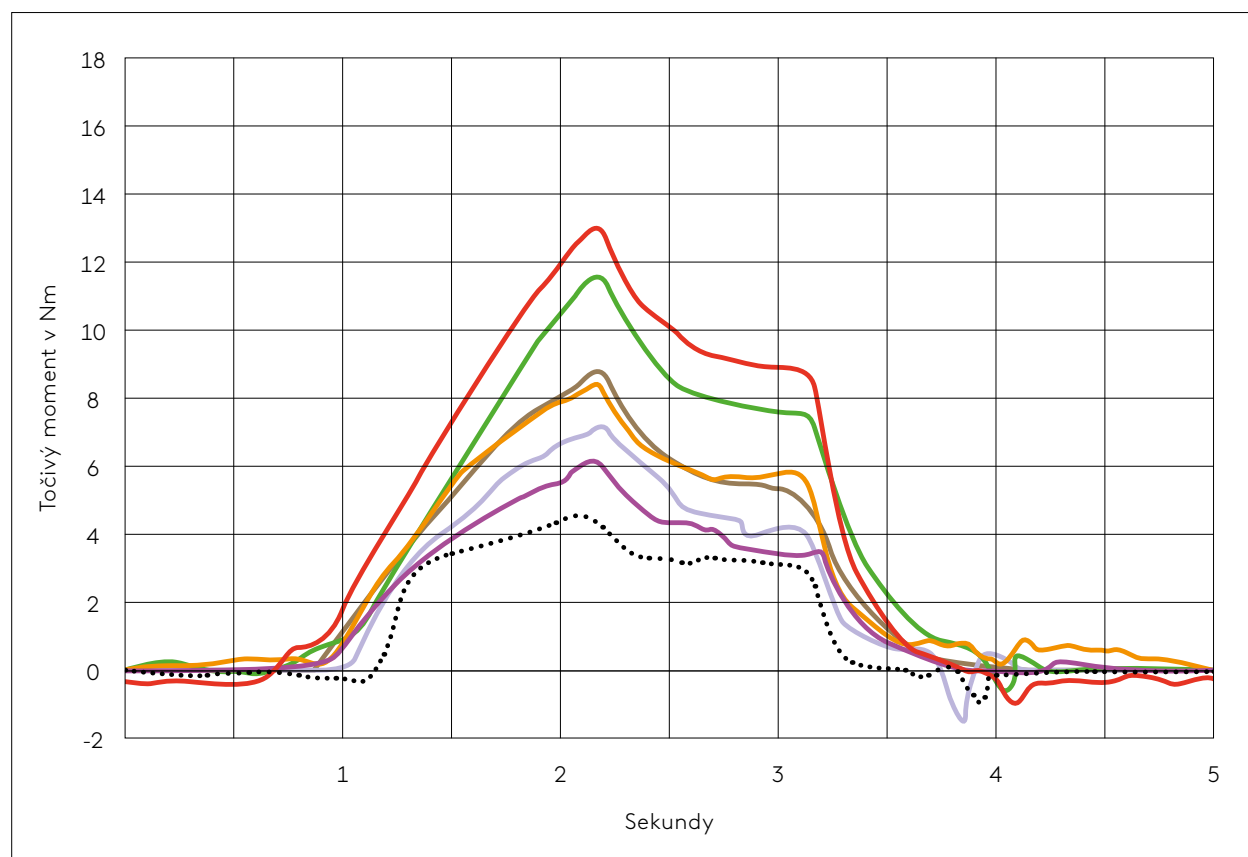

■ Bandáž A – Nová bandáž Aequi Flex
■ Bandáž B
■ Bandáž C
■ Bandáž D

■ Bandáž D
■ Bandáž E
■ Bandáž F
■ Bez Bandáže











Získejte zpět svou svobodu

Pro nás v Push je svoboda pohybu velmi důležitá. Tak moc důležitá, že ji chceme dopřát každému, protože jsme přesvědčeni, že aktivní život je kvalitnější život. A jak to děláme? Vytváříme nekonvenční řešení, díky kterým se může kdokoli po zranění nebo s omezenou mobilitou pohybovat a užívat si známou či nově objevenou svobodu.

Push braces. Od roku 1986.



Push for
freedom

push.eu

9037 - 06/23